

en

**Description of device & contents**

Trio Silken® gel

**INTENDED USE:** As a filler / sealant and protective skin barrier for use on exposed skin around stoma, wound and fistula sites. A filler for skin folds and uneven skin surfaces.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

- 1 To open the tube. Unscrew the cap. Puncture the tube closure with the reverse side of the cap.
- 2 Ensure the skin is clean and dry.
- 3 Squeeze the silicone gel from the base of the tube, to fill depressions and skin contours. Do not spread.
- 4 Apply the ostomy wafer or pouching system as normal while the Trio Silken® gel is still wet.
- 5 Trio Silken® gel will set on the skin or underneath the appliance during wear time.

**REMOVAL:**

- 1 Peel the Trio Silken® gel from the skin surface. The gel may peel off with the appliance.

**IMPORTANT NOTE:**

Trio Silken® gel is not a glue.

**CAUTION:**

For external use only.  
Do not apply into an open wound or skin ulcer.  
Avoid contact with eyes.  
Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.

**SERIOUS INCIDENT REPORTING**

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

**SAFE DISPOSAL INSTRUCTIONS**

Do not dispose in the toilet. Dispose of product according to national or local laws

it

**Descrizione del dispositivo e contenuti**

Trio Silken® gel

**FINALITÀ D'USO:** In qualità di riempitivo / sigillante con effetto di barriera protettiva della pelle, da utilizzare sulla cute esposta in prossimità di una stomia, di lesioni e di fistole. Riempitivo per lembi di cute e superfici cutanee irregolari.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

- 1 Per aprire il tubetto. Svitare il tappo. Forare la chiusura del tubetto con il retro del tappo.
- 2 Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta.
- 3 Premere dalla base del tubetto per far uscire il gel al silicone e riempire avvallamenti e contorni cutanei. Non spalmare.
- 4 Applicare la placca o la sacca per stomia come di consuetudine, mentre il gel Trio Silken® è ancora umido.
- 5 Il gel Trio Silken® gel si solidificherà sulla pelle o al di sotto del dispositivo medico durante l'utilizzo.

**RIMOZIONE:**

- 1 Rimuovere il gel Trio Silken® dalla pelle. È possibile che il gel si stacchi unitamente al dispositivo medico utilizzato.

**IMPORTANTE:**

Il gel Trio Silken® non è un collante.

**ATTENZIONE:**

Solo per uso esterno.  
Non applicare su ferite aperte o ulcerazioni cutanee.  
Evitare il contatto con gli occhi.  
Se dovesse manifestarsi irritazione cutanea, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

**SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI SERI**

Qualsiasi evento serio che si sia verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO**

Non gettare nel water. Smaltire il prodotto conformemente alle norme nazionali e locali

fr

**Description et contenu**

Gel Trio Silken®

**USAGE PREVU:** Comme produit de remplissage / scellant et barrière protectrice de la peau à utiliser sur les zones cutanées exposées autour d'une stomie, de plaies et de fistules. Remplit les plis cutanés et les surfaces inégales de la peau.

**INSTRUCTIONS D'EMPLOI:**

- 1 Pour ouvrir le tube. Dévisser le capuchon. Percer la pellicule obturant le tube avec l'autre côté du capuchon.
- 2 Veiller à ce que la peau soit propre et sèche.
- 3 Presser la base du tube pour faire sortir le gel en silicone et remplir les dépressions cutanées et les contours de la peau. Ne pas étaler.
- 4 Appliquer comme à l'accoutumée la plaquette de stomie ou le système de poche pendant que le gel Trio Silken® est encore humide.
- 5 Le gel Trio Silken® se fixera sur la peau ou sous le dispositif pendant la durée du port de l'appareillage.

**RETRAIT:**

1. Retirer le gel Trio Silken® de la surface cutanée. Le gel peut s'enlever avec le dispositif.

**REMARQUE IMPORTANTE**

Le gel Trio Silken® n'est pas une colle.

**ATTENTION:**

Pour usage externe uniquement.  
Ne pas appliquer sur une plaie ouverte ou un ulcère cutané.  
Eviter le contact avec les yeux.  
En cas d'irritation de la peau, arrêter l'utilisation et consulter un professionnel de santé.

**SIGNALEMENT D'INCIDENT GRAVE**

La survenance de tout incident grave lié à l'appareil doit être signalée au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

**INSTRUCTIONS POUR ELIMINER LE PRODUIT EN TOUTE SECURITE**

Ne jetez pas le produit dans les toilettes. Éliminez-le selon les règles nationales ou locales.

es

**Descripción del dispositivo y contenidos**

Trio Silken® gel

**APLICACIÓN DESEADA:** Relleno / sellador y barrera protectora de la piel para usar en la piel expuesta alrededor de las zonas del estoma, la herida y la fistula. Relleno para los pliegues y las superficies desiguales de la piel.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- 1 Para abrir el tubo. Desenrosque el tapón. Haga un agujero en el cierre del tubo con la parte trasera del tapón.
- 2 Asegúrese de que la piel esté limpia y seca.
- 3 Apriete el gel de silicona desde la base del tubo para rellenar los surcos y los contornos de la piel. No lo extienda.
- 4 Coloque la bolsa de ostomía o el sistema de bolsa como de costumbre mientras el gel Trio Silken® aún está húmedo.
- 5 El gel Trio Silken® se solidificará en la piel o debajo del dispositivo mientras lo lleve puesto.

**EXTRACCIÓN**

1. Retire el gel Trio Silken® de la superficie de la piel. Puede que el gel se despegue con el dispositivo.

**IMPORTANTE:**

El gel Trio Silken® no es un pegamento.

**ATENCIÓN:**

Solo para uso externo.  
No lo aplique sobre una herida abierta o una úlcera de la piel.  
Evite el contacto con los ojos.  
Si se irrita la piel, deje de utilizar el producto y consulte a un profesional de salud.

**NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES:**

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

**INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA:**

No tire el producto en el inodoro. Elimine el producto de acuerdo con las leyes nacionales o locales

de

**Beschreibung Gerät und Inhalt**

Trio Silken® Stomageel

**VERWENDUNGSZWECK:** Zum Auffüllen, Abdichten und als Hautschutzbarriere im Bereich von Stomas, Wunden und Fisteln. Gel zum Auffüllen von Hautfalten und Unebenheiten.

**ANWENDUNG:**

- 1 Um die Tube zu öffnen Verschlusskappe abschrauben. Membran in der Tubenöffnung mit der Rückseite der Tubenkappe durchstechen.
- 2 Die Haut muss vor der Anwendung sauber und trocken sein.
- 3 Silikongel aus der Tube drücken, um Vertiefungen und Hautkonturen aufzufüllen. Nicht verstreichen.
- 4 Die Basisplatte oder das Beutelsystem wie üblich anbringen, während das Trio Silken® Gel noch nass ist.
- 5 Trio Silken® Stomageel formt sich während dem Tragen auf der Haut oder unter der Versorgung aus.

**ENTFERNUNG:**

1. Trio Silken® Stomageel lässt sich einfach von der Hautoberfläche abziehen. Wenn das Gel an der Versorgung haftet, kann beides zusammen in einem Stück abgelöst werden.

**WICHTIGER HINWEIS:**

Trio Silken® Stomageel ist kein Leim.

**ACHTUNG:**

Nur zur äusseren Anwendung bestimmt.  
Nicht anwenden bei offenen Wunden oder Hautgeschwüren.  
Kontakt mit den Augen vermeiden.  
Bei Hautreizungen die Behandlung abbrechen und einen Arzt konsultieren.

**MELDUNG SCHWERER STÖRUNGEN**

Im Falle einer schweren Störung, die im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, sollte diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

**ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG**

Nicht in der Toilette entsorgen. Entsorgung des Produktes gemäß nationalen oder lokalen Gesetzen

nl

**Productbeschrijving en inhoud.**

Trio Silken® gel

**BEOOGD GEBRUIK:** Te gebruiken als opvulmiddel en huidbeschermende afdichting op de huid rondom de stoma, op wondranden en bij fistels.

**GEbruiksAANWIJZING:**

- 1 Openen van de tube. Draai de dop van de tube en prik met de punt van het dopje een opening in het afdichtfolie.
- 2 Zorg dat de huid schoon en droog is.
- 3 Knijp de siliconen gel uit de tube rechtstreeks in plooiën, oneffenheden of te beschermen gebied van de huid. Niet uitmeren.
- 4 Breng zoals gewoonlijk de huidplaat of opvangmateriaal aan op de natte Trio Silken® gel.
- 5 Trio Silken® gel zal uitharden gedurende de draagtijd van het opvangmateriaal.

**VERWIJDEREN:**

1. Pel de Trio Silken® gel van de huid. De gel zal samen met het opvangmateriaal loskomen van de huid.

**BELANGRIJKE NOTITIE:**

Trio Silken® gel is geen lijm.

**WAARSCHUWING:**

Alleen voor uitwendig gebruik.  
Niet toepassen in een open wond of huidzweer.  
Vermijd contact met de ogen.  
Indien roodheid of irritatie optreedt, stop met gebruik en raadpleeg een medisch professional.

**MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN:**

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

**INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE VERWIJDERING:**

Niet in het toilet gooien. Verwijder het product volgens de nationale of plaatselijke wetgeving.

jp

**製品説明**

Trio Silken® シリコーンストーマゲル

**用途:** ストーマ周辺皮膚、傷、瘻孔に使用する充填材/シーラント及び皮膚保護剤。皮膚のしわや不均一な皮膚表面に使用する充填材。

**使用方法:**

チューブを開封するためにキャップを回します。キャップに付いている突起でチューブの銀色のシールに穴を開け開封します。塗布する部分の皮膚が清潔で乾いていることを確認します。チューブの底部からゲルを押し出し、くぼみや皮膚の外形に充填します。ゲルを伸ばして塗らないでください。  
Trio Silken® シリコーンストーマゲルが固まっていなくても、ゲルを塗布した上にストーマ装具を貼付します。  
装着期間中、皮膚上もしくはストーマ装具の下で Trio Silken® シリコーンストーマゲルは固まります。

**剥離:**

1. Trio Silken® シリコーンストーマゲルを皮膚表面から剥がします。ストーマ装具と一緒に剥がれることもあります。

**注:**

Trio Silken® シリコーンストーマゲルは接着剤ではありません。

**警告:**

外用のみにお使いください。  
開放創または皮膚潰瘍に塗布しないでください。  
目に入らないようにご注意ください。  
ストーマ周辺皮膚がかゆみや炎症を起こした場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。

**重大インシデント報告**

デバイスに関連して発生した重大なインシデントは、ユーザーおよび/または患者が存在する加盟国の製造業者および主管当局に報告する必要があります。

**安全な廃棄処理に関する指示**

トイレに流さないでください。製品は国内法令または地域法に従って廃棄してください。

trio healthcare™

Trio Silken® gel

REF TR1070

REF TR1071

! 50°C 122°F

CE MD UK CA

Trio Healthcare Ltd.  
Unit 2A-2B, Sandylands Business Centre,  
Carleton New Rd, Skipton,  
N. Yorkshire BD23 2AA UK  
Tel: +44(0)1756 700599

TRIO CUSTOMER CARELINE

Tel: 0800 531 6280 (UK)  
+44 (0) 844 800 5881 (International)  
careline@triohealthcare.co.uk

EC REP EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

TrioOstomyCare.com

SE

**Beskrivning av produkt & innehåll**  
Trio Silken® gel

**AVSEDD ANVÄNDNING:** Skyddande gel för användning som tätning eller uttyllnad vid håligheter/hudveck och på utsatt hud runt stomi, sår eller fistel.

#### INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

- 1 För att öppna tuben, skruva av locket och punktera förseglingen med lockets motsatta sida.
- 2 Se till att huden är ren och torr.
- 3 Kläm ut gelen från tubens bakre ände, fyll den i håligheter eller hudveck. Bred inte ut den.
- 4 Applicera plattan/bandaget som vanligt, medan Trio Silken® gel fortfarande är fuktig.
- 5 Trio Silken® gel hårdar under plattan under användningstiden.

#### AVLÄGSNANDE:

1. Skala försiktigt av Trio Silken® gel från huden. Gelen avläsnas ibland tillsammans med plattan/bandaget.

**VIKTIG INFORMATION:** Trio Silken® är inte ett lim.

#### FÖRSIKTIGHET:

Endast för utvärtes bruk.  
Applicera inte i öppet sår.  
Undvik kontakt med ögon.  
Om hudirritation uppkommer, avsluta användning och konsultera sjukvårdspersonal.

**RAPPORTERING AV ALLVARLIGA TILLBUD:** Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

**ANVISNINGAR FÖR SÄKER KASSERING:** Kasta inte i toaletten. Kassera produkten i enlighet med nationella eller lokala lagar.

NO

**Beskrivelse av enheten og innholdet**  
Trio Silken® gel

**BRUKSOMRÅDE:** For å fylle ujevnheter i huden rundt stomier, sår og fistler. Som hudbeskyttelse på utsatt hud.

#### BRUKSANVISNING:

- 1 For å åpne tuben. Skru av lokket. Stikk hull i tuben med underside av lokket
- 2 Pass på at huden er ren og tørr
- 3 Klamm ut silikon-gel fra tuben, for å fylle ut fordypninger og hud konturer. Ikke spren gelen utover.
- 4 Sett på stomiplaten eller posesystemet som normalt mens Trio Silken® gelen fremdeles er bløt.
- 5 Trio Silken® gel vil herdes under platen under normal brukstid

#### FJERNING:

1. Trekk Trio Silken® gel fra hudoverflaten. Gelen vil fjernes sammen med plate /posesystem.

**VIKTIG:** Trio Silken® er ikke et lim

#### ADVARSEL:

Kun for utvendig bruk.  
Må ikke benyttes på åpne sår.  
Unngå kontakt med øynene.  
Hvis hud irritasjon oppstår, avslutt bruken og ta kontakt med helsepersonell.

**RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE:** Enhver alvorlig hendelse som har funnet sted i forbindelse med apparatet skal rapporteres til produsenten og kompetente myndigheter i medlemslandet hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

**INSTRUKSJONER FOR SIKKER AVHENDING:** Skal ikke kastes i toalettet. Produktet skal avhendes i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning

DA

**Beskrivelse og indhold**  
Trio Silken® gel

**ANVENDELSESFORMÅL:** Som stomipasta og beskyttende hudbarriere til brug på utsatt hud omkring stomi-, sår- og fistler. En pasta til hudfolder og ujævne hudoverflader

#### BRUGSANVISNING:

- 1 Skru låget af tuben, og punkter folien, med spidsen på bagsiden af låget.
- 2 Huden skal være tør og ren.
- 3 Klæm gelen ud fra tuben, for at fylde ujævnheder på huden. Skal ikke smøres ud.
- 4 Sæt stomiplade eller stomisystem på som vanligt, mens Trio Silken® gel er våd.
- 5 Trio Silken gel hærdes under stomipladen eller stomisystemet under bæreritiden.

#### FJERNELSE:

1. Træk Trio Silken® gel fra hudoverfladen. Gelen kan trækkes af sammen med stomipladen eller stomisystemet.

**VIGTIGT:** Trio Silken® gel er ikke en lim

#### ADVARSEL:

Kun til udvortes brug.  
Bør ikke anvendes på skadet hud eller åbne sår.  
Undgå kontakt med øjnene.  
I tilfælde af irritation, stop brugen og kontakt relevant sundhedspersonale.

**RAPPORTERING AF ALVORLIGE HÆNDELSER:** Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

**INSTRUKTIONER TIL SIKKER BORTSKAFFELSE:** Må ikke bortskaffes i toalettet. Bortskaf produktet i henhold til national eller lokal lovgivning

PL

**Opis produktu**  
Trio Silken® gel

**PRZEZNACZENIE:** Jako wypełniacz / uszczelniacz i bariera ochronna skóry do użytku na odsłoniętej skórze wokół stomii, przetoki i ran. Wypełniacz do fald skóry i nierównych powierzchni skóry

#### INSTRUKCJA UŻYCIA:

- 1 Zdejmij nakrętkę z tubki zawierającej Silken® i przebij uszczelnienie za pomocą ostrego końca z drugiej strony nakrętki.
- 2 Upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
- 3 Wyciśnij żel silikonowy z tubki bezpośrednio na skórę, aby wypełnić nierówności i zalanania. Nie rozsmarowuj go.
- 4 Umieść płytkę stomijną w zwyczajowy sposób Trio Silken® zel w czasie gdy żel jest nadal wilgotny.
- 5 Trio Silken® zel pozostanie na skórze pod płytką podczas jej noszenia.

#### ZDEJMOWANIE:

1. Usuń żel Trio Silken® z powierzchni skóry oddejącą płytkę stomijną. Zazwyczaj żel przylega do płytki i zostanie usunięty z powierzchni skóry razem z nią. Nie pozostawia resztek na skórze.


**WAŻNE INFORMACJE:** Trio Silken® nie jest klejem.

#### UWAGA:

Wyłączenie do użytku zewnętrznego.  
Nie stosuj na otwarte rany oraz owrzodzoną skórę.  
Unikaj kontaktu z oczami.  
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zaprzestać używania i zasięgnąć opinii pielęgniarki stomijnej lub lekarza.

**ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW:** Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, na którego terytorium użytkownik i/lub pacjent przebywa.

**INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ UTYLIZACJI:** Nie wyrzucać do toalety. Produkt należy utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi rozporządzeniami

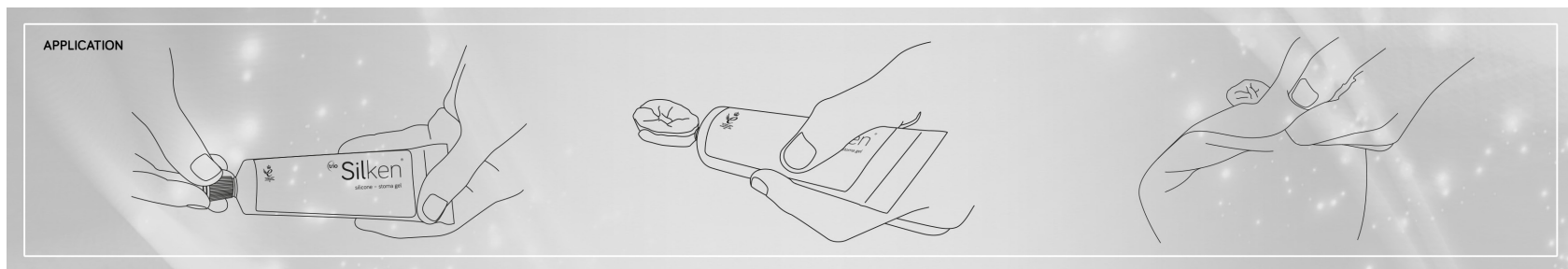

CZ

**Popis pomůcky a obsahu**  
Trio Silken® gel

**URČENÉ POUŽITÍ:** Jako výplň/těsnění a též jako ochranná bariéra pokožky v okolí stomii, ran a píštělí. Pro vyplnění kožních záhybů a nerovnosti na pokožce.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 Pro otevření tuby odsoubijte uzávěr a prorazte otvor tuby opačnou stranou uzávěru.
- 2 Ujistěte se, že pokožka je čistá a suchá.
- 3 Vytlačte silikonový gel od konce tuby a vyplňte prohlubně a okraje pokožky. Neroztírejte.
- 4 Přiložte stomicíku podložku nebo sáček jako obvykle, dokud je Trio Silken® gel ještě vlhký.
- 5 Trio Silken® gel na pokožce nebo pod pomůckou vyrazí během doby nošení.

#### ODSTRANĚNÍ:

1. Sloupněte Trio Silken® gel z pokožky. Gel se někdy může odlepit spolu s pomůckou.

#### DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Trio Silken® gel není lepidlo.

#### UPOZORNĚNÍ:

Pouze k vnějšímu použití.  
Neaplikujte na otevřené rány nebo kožní ulcerace.  
Vyhnete se kontaktu s očima.  
V případě výskytu podráždění pokožky přerušete používání a poraďte se s lékařem.

#### OZNAMENÍ ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen

#### POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI

Nesplachujte do záchodu. Výrobek zlikvidujte v souladu s národními nebo místními zákony.

SK

**Popis pomůcky a obsahu**  
Trio Silken® gel

**URČENÉ POUŽITÍ:** Ako výplň/těsnenie aj ako ochranná bariéra pokožky v okolí stomii, rán a fistúl. Na vyplnenie kožných záhybov a nerovnosti na pokožke.

#### NÁVOD NA POUŽITIE:

- 1 Pre otvorenie tuby odsoubijte uzávěr a prerazte otvor tuby opačnou stranou uzávěru.
- 2 Uistite sa, že je pokožka čistá a suchá.
- 3 Vytlačte silikonový gel odspodu tuby na vyplnenie prehĺbín a okrajov kože. Neroztierajte.
- 4 Priložte stomicú podložku alebo vrecko ako zvyčajne, dokedy je Trio Silken® gel ešte vlhký.
- 5 Trio Silken® gel na pokožke alebo pod pomôckou stuhne v priebehu doby nosenia.

#### ODSTRÁNENIE:

1. Zlupnite Trio Silken® gel z pokožky. Gel sa niekedy môže odlepiť spolu s pomôckou.

#### DŔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Trio Silken® gel nie je lepidlo.

#### UPOZORNENIE:

Iba na vonkajšie použitie.  
Neaplikujte na otvorené rány alebo kožné ulcerácie.  
Vyhnete sa kontaktu s očami.  
V prípade výskytu podráždenia pokožky prerušete používanie a poraďte sa s lekárom.

#### OZNAMOVANIE ZÁVAŽNÝCH INCYDENTOV

Každý závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné oznámiť výrobcovi a kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

#### POKYNY PRE BEZPEČNÚ LIKVIDACIU

Nesplachujte do záchodu. Výrobok zlikvidujte v súlade s národnými alebo miestnymi zákonmi.

PT

**Descrição do dispositivo e conteúdos**  
Trio Silken® gel

**UTILIZAÇÃO PREVISTA:** Como um preenchedor/selante e barreira protetora de pele para utilização na pele exposta em torno do local do estoma, ferida e fistula. Um preenchedor para boas cutâneas e superfícies de pele irregulares.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- 1 Abra o tubo. Desenrosque a tampa. Perfure o fecho do tubo com o lado inverso da tampa
- 2 Certifique-se de que a pele está limpa e seca.
- 3 Aperte o gel de silicone a partir da base do tubo, para preencher as depressões cutâneas e os contornos da pele. Não espalhe.
- 4 Aplique a bolsa de estomia ou o sistema de bolsa com o gel Trio Silken® ainda molhado.
- 5 O gel Trio Silken® irá solidificar na pele ou sob o aparelho durante o período de utilização.

#### REMOÇÃO

1. Retire o gel Trio Silken® da superfície da pele. O gel pode ser retirado com o aparelho.

**NOTA IMPORTANTE:** O gel Trio Silken® não é uma cola.

#### CUIDADO:

Apenas para utilização externa.  
Não aplique numa ferida aberta ou numa úlcera de pele.  
Evite o contacto com os olhos.  
Caso ocorra uma irritação da pele, pare de utilizar e consulte um profissional de saúde.

**COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES GRAVES:** Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à entidade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido.

**INSTRUÇÕES PARA UMA ELIMINAÇÃO SEGURA:** Não elimine o produto na sanita. Elimine o produto de acordo com as leis locais ou nacionais.

TR

**Ürün Tanımı ve İçeriği**  
Trio Silken® gel

**KULLANIM AMACI:** Stoma, yara ve fistül alanlarının etrafındaki açık cildi korumak ve bariyer oluşturmak amacıyla kullanılan dolgu maddesidir. Cilt kırılmaları ve pürüzlü cilt yüzeyleri için bir dolgu maddesidir.

#### KULLANIM TALİMATLARI:

- 1 Tüpü açmak için kapağı çeviriniz. Kapağın arka kısmıyla tüpün ağız kısmını deliniz.
- 2 Cildin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- 3 Silikon jel, tüpün alt kısmından sikarak cilt kontürlerini ve çukurlukları doldurunuz. Jeli yaymayınız.
- 4 Trio Silken® nemliken, ostomi adaptörünü ve torbasını alışılagelmiş şekilde uygulayınız.
- 5 Cilt yüzeyinde ve uygulanan üründen altı Trio Silken® jel etkisini sürdürecektir.

#### ÇIKARMA İŞLEMİ:

1. Trio Silken® jel cilt yüzeyinden soyunuz. Muhtemelen ürünle birlikte jel soyulacaktır.

#### BİLGİ NOTU:

Trio Silken® jel yapıştırıcı değildir.

#### DIKKAT:

Yalnızca harici kullanım içindir.  
Açık yaraya ve cilt ülserine uygulamayınız.  
Gözle temastan kaçınız.  
Ciltte hassasiyet oluşması durumunda, kullanımına son veriniz ve sağlık çalışanına danışınız.